

エアマットレス「こちあ」をお使いの方へ


エアマットレスの計画停電時の対処について

■停電前の対応

停電時にはエアマットレスの一部から空気が少しずつ漏れ出すため、時間経過とともに底づき現象（からだとベッドのフレームについてしまう現象）が発生することがあります。

空気の漏れ出しをより遅らせるため、停電の際には以下の対応をしていただけますよう、お願い申し上げます。

- 停電する前に、電源ボタンを一度押し、電源をオフすることで、空気が漏れない状態にする。
- （停電前に電源をオフにすることができなかった場合を想定して）頭部やかかと部の空気の漏れに備えて、頭やかかとの下に枕やクッションを入れる。

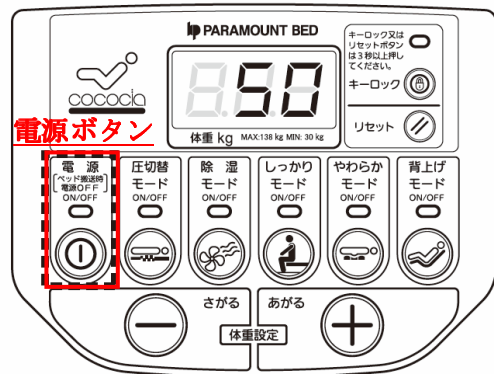

電源をオフにすると、ボタンの上のランプが緑からオレンジ色に変わります。
停電になると、ランプは消えます。

ご利用者さまの状態（体重や体位など）や、エアマットレスの動作状態により底づきまでの時間は大きく異なりますが、計画停電が実施される3時間程度であれば、底づき現象が発生する可能性は低いと考えております。

※既に停電の場合、3時間を超えるような長時間の停電への対処方法については、下記「こちあセンター」にお電話ください。

■停電終了後の対応

電源が差し込んだ状態になっていれば、停電前に電源をオフにした場合、しなかった場合、どちらの場合においても、電力復旧後には自動的に電源が入り、停電が発生する前の設定状態で使用できます。

■お問い合わせ先

パラマウントベッド株式会社 こちあセンター 0120-02-5518

（住所：千葉県船橋市海神町南1-1648-7）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:20（祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）

※ 「こちあセンター」が計画停電の対象地域に該当する時間帯は、電話がつかない事が想定されますので、ご了承ください。

以上